Versuch 408

Geometrische Optik

Jonah Nitschke Sebastian Pape lejonah@web.de sepa@gmx.de

> Durchführung: 09.05.2017 Abgabe: 16.05.2017

1 Theorie

1.1 Zielsetzung

In dem folgenden Versuch sollen mehrere Gesetzmäßigkeiten der geometrischen Optik, wie zum Beispiel das Abbildungsgesetz und die Linsengleichung, mit verschiedenen Versuchsaufbauten überprüft werden. Zudem sollen diese dann genutzt werden, um für verschiedene Linsen(-Systeme) die Brennweite zu bestimmen.

1.2 Grundlagen der geometrischen Optik

Grundlegend werden in der Optik Linsen aus verschiedenen Materialien betrachtet, die optisch dichter sind als Licht. Durch diese Eigenschaft werden Lichtstrahlen bei Durchgang solch eines Mediums nach dem Brechungsgesetz gebrochen. Da die auftretende Brechung auch Abhängig von der Geometrie des Körpers ist, werden die Linsen meist in zwei Kategorien eingeteilt. Ein Typus ist die Sammellinse, bei der parallel einfallende Lichtstrahlen zum Einfallslot hin gebrochen werden. Dadurch entsteht an dem Punkt, an dem sich die Lichtstrahlen bündeln ein reeles Bild in der Entfernung b (Bildweite) zur Hauptebene der Linse (siehe Abbildung 1).

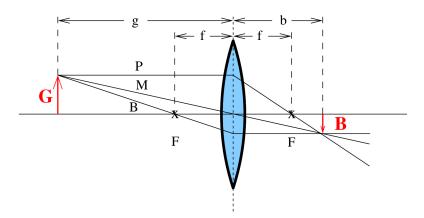


Abbildung 1: Bildrekonstruktion des Strahlenverlaufs bei einer Sammellinse.[1]

Ein weiterer Typus ist die Streulinse, bei der die Lichtstrahlen vom Einfallslot weg gebrochen werden. Dadurch entsteht lediglich ein virtuelles Bild, welches eine negative Bildweite besitzt (siehe Abbildung 2). Aufgrund dieser Eigenschaften wird bei Sammellinsen von einer positiven Brennweite und bei Streulinsen von einer negativen Brennweite gesprochen.

Während bei einer dünnen Linse die Brechung auf lediglich eine Mittelenbene reduziert werden kann, müssen bei dickeren Linsen zwei Hauptebenen betrachtet werden

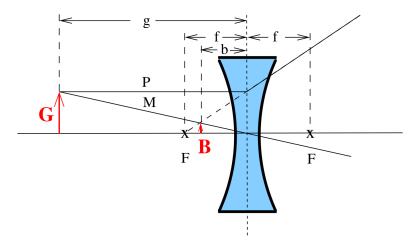


Abbildung 2: Bildrekonstruktion bei einer Streulinse. [1]

(siehe Abbildung 3). Um nun optische Bildrekonstruktionen durchzführen, werden drei charakteristische Strahlen eingeführt.

- <u>Parallelstrahl</u>: Der Parallelstrahl läuft von der Gegenstand senkrecht auf die Mittelbzw. Hauptebene zu, wird dort gebrochen und läuft dann durch den Brennpunkt.
- Mittelpunktsstrahl: Der Mittelpunktsstrahl läuft direkt durch die Mitte der Linse und läuft durchgehen in die selbe Richtung.
- Brennpunktstrahl: Der Brennpunktstrahl läuft durch den Brennpunkt auf die Mittel- bzw. Haupteben zu, wird dort gebrochen und läuft dann senkrecht zur Mittel- bzw. Hauptebene bis zum Bild.

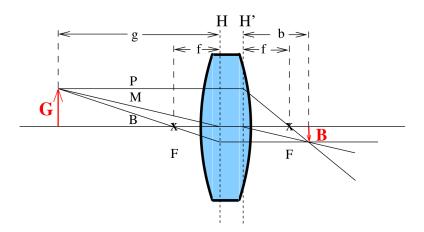


Abbildung 3: Darstellung der Bildrekonstruktion bei einer dicken Linse.[1]

Der Schnittpunkt aller drei Strahlen markiert dann das Abbild. Zwischen den, bei der Bildrekonstruktion betrachteten Größen besteht nach dem Abbildungsgesetz folgender

Zusammenhang:

$$V = \frac{B}{G} = \frac{b}{q},\tag{1}$$

wobei V den Abbildungsmaßstab, B und G Bild- bzw. Gegenstandsgröße und b und g die Bild- bzw. Gegenstandsweite beschreiben. Für dünne Linsen folgt zudem die Linsengleichung, welche eine Zusammenhang zwischen der Brennweite f sowie b und g herstellt (Formel (2)).

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{2}$$

Bei dickeren Linsen müssen zwei Hauptebenen betrachtet werden. Hier werden Brennweite und weitere Größen immer bezüglich einer Hauptebene angegeben, sodass die Linsengleichung auch hier ihre Gültigkeit behält.

Durch Linsen erzeugte Abbildungen können aufgrund der Gültigkeit der Formeln (1) und (2) für achsennahe Strahlen einen Abbildungsfehler bei der Betrachtung achsenferner Strahlen haben. Bei der sphärischen Abberration liegen die Brennpunkte beider Strahlentypen nicht aufeinander, sodass es zu einer Unschärfe kommt. Dieser Fehler kann allerdings durch eine Irisblende behoben werden. Bei der chromatischen Abberation kommt es aufgrund der unterschiedlichen Wellenlängen im Lichtspektrum zu einer Dispersion bei der Brechung verschiedener Farben.

Eine weitere Größe zur Beschreibung von Linsen ist die Brechkraft D, welche als reziproke Brennweite definiert ist. Bei einem System von mehreren dünnen Linsen können die einzelnen Brechkräfte einfach summiert werden:

$$D = \sum_{i}^{N} D_{i} = \sum_{i}^{N} \frac{1}{f_{i}}.$$
 (3)

Zur Bestimmung der Brennweite einer Linse werden im Folgendem mehrere Methoden erläutert. Erstens kann die Brennweite durch Messung von Bild- und Gegenstandsweite bestimmt werden. Dafür wird die Linsengleichung (Formel (2)) genutzt, um aus Bild- und Gegenstandsweite die Brennweite zu bestimmen (siehe Abb. 1).

Eine weitere Möglickeit bietet die Methode nach Bessel. Hier wird der Abstand zwischen Gegenstand und Bild konstant gehalten und es werden zwei verschiedene Positionen gesucht, bei denen das Bild scharf dargestellt wird (siehe Abbildung 4). Da es sich um eine symmetrische Linsenstellung handelt, gilt folgende Beziehung:

$$b_1 = g_2 \text{ und } b_2 = g_1.$$
 (4)

Mit den Größen $e = g_1 + b_1 = g_2 + b_2$ (Abstand zwischen Bild und Gegenstand) sowie $d = g_1 - b_1 = g_2 - b_2$ (Abstand zwischen den beiden Linsenpositionen) lässt sich dann ein Formel für die Brennweite der Linse herleiten (Formel (5)).

$$f = \frac{e^2 - d^2}{4e} \tag{5}$$

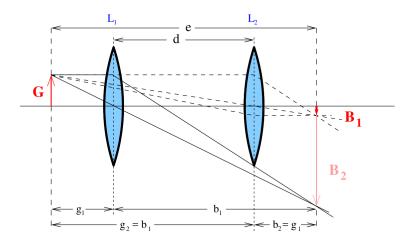


Abbildung 4: Linsenpositionen zur Bestimmung der Brennweite mit der Methode von Bessel.[1]

Eine weitere Methode zur Bestimmung der Brennweite ist die Methode von Abbe. Bei dieser können Brennweite und Lage der Hauptebenen aus dem Abbildungsmaßstab hergeleitet werden. Dafür werden bei einer dicken Linse wieder Bild- und Gegenstandsweite in Bezug zu einem beliebigen Bezugspunkt A gemessen (siehe Abb. 5). Hierbei gelten folgende Beziehungen:

$$g' = g + h = f \cdot \left(1 + \frac{1}{v}\right) + h \tag{6}$$

$$b' = b + h' = f \cdot (1 + v) + h'. \tag{7}$$

Der gewählte Referenzpunkt A muss dabei nicht innerhalb der Hauptebenen liegen.

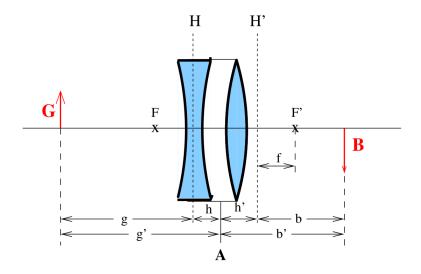


Abbildung 5: Aufbau des Linsensystems bei der Bestimmung der Brennweite mittels der Methode von Abbe.[1]

2 Versuchsaufbau und Durchführung

Es wird ein Aufbau nach Abbildung 6 verwendet. Auf einer Schiene werden die verwendete Blende mit L-förmig angeordneten punktförmigen Spalten (2), die verschiedenen Linsen (3) sowie der Schirm (4) montiert. Die als Lichtquelle verwendete Halogenlampe (1) wird vor der Schiene aufgestellt. Mit der auf der Schiene vorhandenen Längenskala werden die verschiedenen Abstände gemessen.

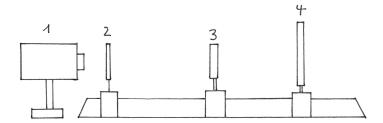


Abbildung 6: Schematische Darstellung des verwendeten Aufbaus bei den folgenden Messungen. [1]

2.1 Bestimmung der Brennweite durch Messung der Bild- und Gegenstandsweite

Zuerst wird eine Sammellinse mit bekannter Brennweite auf der Schiene montiert. Mit der Linse und der Längenskala werden dann verschiedene Gegenstandsweiten eingestellt. Durch Verschieben des Schirmes zu einem Punkt, auf dem das Bild scharf erscheint werden die entsprechendem Bildweiten gemessen. Diese Messung wird 10 mal für verschiedene Gegenstandsweiten durchgeführt. Bei den ersten fünf Messungen werden zudem Bildund Gegenstandsgröße gemessen.

Anschließend wird eine dehnbare, mit Wasser gefüllte Linse auf der Schiene montiert. Während mit dem selben Verfahren wie bei der Sammellinse die Gegenstand- und Bildweite gemessen werden, wird mit einer Spritze ein konstanter Druck innerhalb der Linse aufrecht erhalten. Auch diese Messung wird 10 mal für verschiedene Gegenstandsweiten durchgeführt.

Danach wird mit der Linse noch einmal die Akkomodation des Auges betrachtet, indem bei konstanter Bild- und Gegenstandsweite der Druck in der Linse solange verändert wird, bis das Bild auf dem Schirm scharf erscheint.

2.2 Bestimmung der Brennweite mit der Methode von Bessel

Zuerst werden Blende und Schirm auf einen konstanten Abstand gebracht. Nun wird die Sammellinse zwischen Schirm und Blende verschoben, bis auf dem Schirm ein scharfes Bild zu sehen ist. Das dadurch entstehende Wertepaar aus Bild- und Gegenstandsweite wird notiert. Danach wird die Linse bei konstantem Abstand zwischen Schirm und Blende noch weiter verschoben, bis das Bild erneut scharf dargestellt wird. Das zweite Wertepaar wird ebenfalls notiert. Die Messung wird 10 mal für verschiedene Abstände zwischen Blende und Schirm durchgeführt.

Um die chromatische Abberation betrachten zu können, werden anschließend nacheinander ein roter und ein blauer Filter vor die Blende montiert. Für beide Filter wird die Messung nach der Besselmethode fünf mal durchgeführt.

2.3 Bestimmung der Brennweite mit der Methode von Abbe

Die Methode nach Abbe beschäftigt sich mit der Brennweitenbestimmung von Linsensystemen. Zuerst wird ein Linsensystem aus Streu- und Sammellinse auf dem Schirm montiert. Dabei werden die Reiter beider Linsen direkt aneinander geschoben und der Berührungspunkt wird als Referenzpunkt A gewählt. Nun wird mithilfe des Systems eine bestimmte Gegenstandsweite eingestellt. Der Schirm wird solange verschoben, bis das Bild scharf erscheint. Das entstehende Wertepaar aus Bild- und Gegenstandsweite, sowie die Bildgröße werden notiert und die Messung anschließend neun mal für verschiedene Gegenstandsweiten wiederholt.

3 Auswertung

Die Größenmessung der Gegenstads- und der Bildgröße wurde mit einem Geodreieck durchgeführt. Die weiteren Messwerte wurden an einem Lineal, welches an der Schiene integriert ist, abgelesen. Es wird ein Ablesefehler von 0,05 cm angenommen. Anhand der genommenen Messwerte wird die Linsengleichung (2) und das Abbildungsgesetz (1) überprüft.

Damit das Abbildungsgesetz überprüft werden kann, sind die Mittelwerte der Messung der Gegenstands- und der Bildweite verwendet worden. Als Fehler wurden die Standardabweichungen des Mittelwertes angegeben. Die Messdaten sind in Tabelle 1 dargestellt.

$$\frac{B}{G} = (569 \pm 20) \cdot 10^{-1} \,\mathrm{cm}$$

$$\frac{\langle b \rangle}{\langle g \rangle} = (3929 \pm 14) \cdot 10^{-2} \,\mathrm{cm}$$

Tabelle 1: Messdaten der ersten Messung. Brennweite der verwendeten Linse ist bekannt $(10\,\mathrm{cm})$.

g in cm	b in cm	Bildgröße B
15	27,80	2,80
20	18,40	1,90
25	15,30	$1,\!45$
30	$13,\!85$	1,15
35	13,10	$0,\!95$
40	$12,\!50$	_
45	12,05	_
50	11,70	_
55	11,40	_
60	$11,\!25$	_

Die Fehler der Größen in 1 haben alle den Ablesefehler 0.05 cm.

Die Mittelwerte < b > und < g > in die Linsengleichung (2) eingesetzt, ergeben die folgenden Werte. Die Brennweite der Linse, ist vom Herstellen mit 10 cm angegeben.

$$< f_1>_{\rm gemessen} = \, (10\,578 \pm 26) \cdot 10^{-3} \, {\rm cm}$$

Die Verbindungsgereaden, zu den Wertepaaren $(g_i|b_i)$, der Linse mit bekannter Brennweite sind in 7 dargestellt.

Der Schnittpunkt der Geraden im Diagramm 7 ist mit Hilfe des Mauscoursers abgelesen worden. Der Ablesefehler wird mit 0,3 cm angegeben. Der Schnittpunkt hat einen Wert von $S_1=((99\pm3)\cdot 10^{-1}|(94\pm3)\cdot 10^{-1})$. Die Angaben sind in Centimetern.

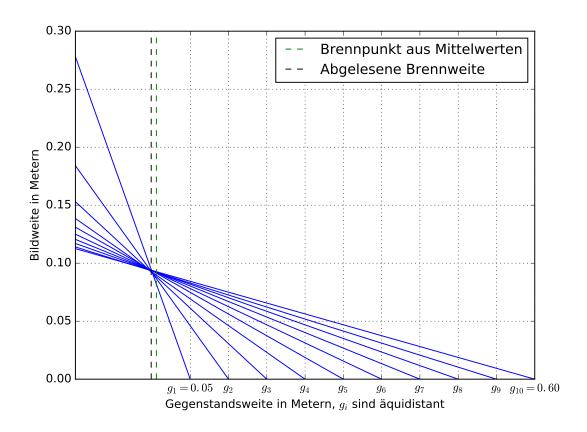


Abbildung 7: Wertepaare $(g_i|b_i)$ aufgetragen. Zudem ist der Mittelwert der gemessenen Brennweite, sowie der abgelesene Schnittpunkt der Geraden eingetragen.

Desweiteren wurde die Brennweite einer unbekannten Linse bestimmt. Es wurde gleich verfahren, wie bei der Messung der bekannten Linse. Die Messdaten sind in Tabelle 2 dargestellt.

$$< f_2 >_{\text{gemessen}} = (9028 \pm 3) \cdot 10^{-2} \,\text{cm}$$

Das Diagramm 8 zeigt die Verbindungsgeraden, der Wertepaare der gemessenen $(g_i|b_i)$.

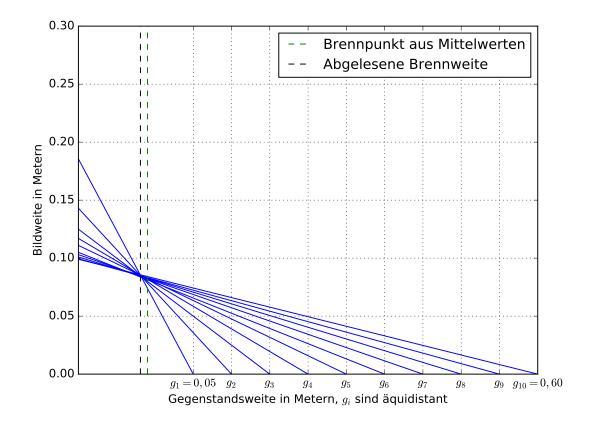


Abbildung 8: Wertepaare $(g_i|b_i)$ aufgetragen. Zudem ist der Mittelwert der gemessenen Brennweite, sowie der abgelesene Schnittpunkt der Geraden eingetragen.

Der abgelesene Schnittpunkt ist gegeben mit $S_2=((81\pm3)\cdot 10^{-1}|(84\pm3)\cdot 10^{-1})$. Die Angaben sind in Centimetern.

Die Messgrößen in Tabelle 2 haben alle den Ablesefehler $0.05\,\mathrm{cm}$.

3.1 Bestimmung der Brennweite nach Bessel

Die Messdaten der Messung sind in Tabelle 3 dargestellt. Damit der Datensatz größer ist, werden die Messdaten von b_1, g_1 und b_2, g_2 verwendet. Theoretisch sind $b_1 = g_2$ und $b_2 = g_1$ identisch.

Tabelle 2: Messdaten der Linse mit unbekannter Brennweite.

g in cm	b in cm
15	18,55
20	14,30
25	$12,\!50$
30	11,70
35	11,10
40	10,50
45	10,30
50	10,10
55	9,95
60	9,90

Die Mittelwerte der Messdaten wurden in die Formel (5) eigetragen. Daraus ergibt sich die folgende Brennweite.

$$f_{\text{Bessel}} = 9.67 \,\text{cm}$$
 (8)

Der Fehler von (8) ist, bezüglich der Messgenauigkeit, vernachlässigbar klein und wird daher weggelassen.

Tabelle 3: Messdaten der Methode nach Bessel

e in cm	g_1 in cm	g_2 in cm
40	16,6	23,70
45	14,2	31,05
50	13,2	37,00
52	12,9	40,00
55	12,6	$42,\!60$
58	12,4	$45,\!35$
60	12,2	48,00
62	12,2	50,75
65	12,0	$53,\!35$
70	11,8	58,45

Die Messgrößen in Tabelle 3 haben alle den Ablesefehler 0,05 cm.

Darüberhinaus wurde die chromatische Abberration untersucht. Die Messdaten sind in Tabelle 4 dargestellt.

$$f_{\rm rot} = (967 \pm 1) \cdot 10^{-2} \,\mathrm{cm}$$
 (9)

$$f_{\rm blau} = 966 \cdot 10^{-2} \, \text{cm}$$
 (10)

Der Fehler bei (10) ist, bezüglich der Messungenauigkeit, zu vernachlässigen.

Tabelle 4: Messdaten zur chromatischen Abberration

e in cm	$g_{1,\mathrm{rot}}$ in cm	$g_{2,\mathrm{rot}}$ in cm	$g_{1,\mathrm{blau}}$ in cm	$g_{2,\mathrm{blau}}$ in cm
45	$14,\!35$	31,0	14,10	31,2
50	$13,\!20$	37,0	$13,\!25$	$37,\!1$
55	12,60	$42,\!5$	12,70	42,7
60	$12,\!35$	48,1	$12,\!40$	48,2
65	12,00	$53,\!5$	$12,\!10$	$53,\!3$

Die Fehler von $e,\,g_{1,\mathrm{rot}},\,g_{2,\mathrm{rot}},\,g_{1,\mathrm{blau}}$ und $g_{2,\mathrm{blau}}$ betragen jeweils $0.05\,\mathrm{cm}$.

3.2 Bestimmung der Brennweite von Linsensystemen nach Abbe

Die Messdaten der Messung sind in Tabelle 5 dargestellt. Mit den Formeln (6) und (7) ergeben sich daraus die folgenden Werte.

$$f_{\rm g} = (1693 \pm 32) \cdot 10^{-2} \, {\rm cm} \tag{11}$$

$$f_{\rm h} = (-938 \pm 95) \cdot 10^{-2} \,\text{cm}$$
 (12)

$$f_{\rm b} = (1442 \pm 17) \cdot 10^{-2} \,\text{cm}$$
 (13)

$$f_{\rm h'} = (1305 \pm 31) \cdot 10^{-2} \,\mathrm{cm}$$
 (14)

Die Messgrößen in der Tabelle 5 haben alle den Ablesefehler von $0,05\,\mathrm{cm}$

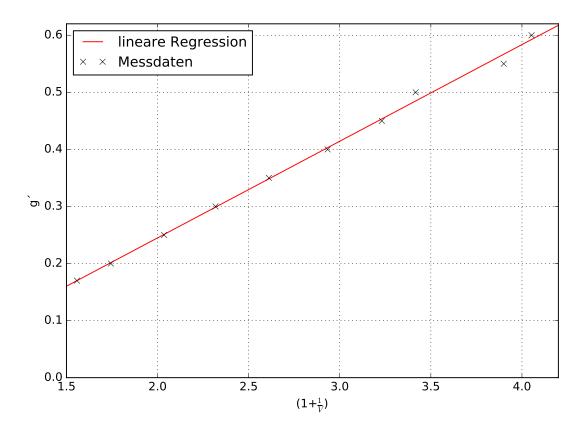


Abbildung 9: Wertepaare $(1+\frac{1}{V_i}|g_i)$ mit linearer Regression.

Tabelle 5: Messdaten der Methode nach Abbe

b+g in cm	g in cm
70,0	17
67,3	20
66,6	25
68,1	30
71,4	35
75,0	40
79,0	45
83,3	50
87,5	55
92,1	60
	70,0 67,3 66,6 68,1 71,4 75,0 79,0 83,3 87,5

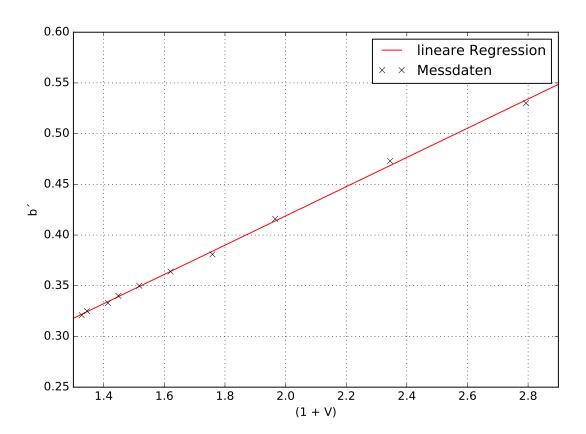


Abbildung 10: Wertepaare $(1+V_i|b_i)$ mit linearer Regression.

4 Diskussion

Anfangs ist zu erwähnen, dass die Grad der Bildschärfe per Hand, und somit nur subjektiv bestimmt werden konnte. Damit ist anzunehmen, dass die Messergebnisse auf Grund des Messerfahrens fehlerbehaftet sind. Im Folgendem werden die Messergebnisse hinsichtlich ihrer Aussagekraft diskutiert.

Die Messgenauigkeit der Brennweitenmessung ist in Diagramm 7 einzusehen. Bei einer hohen Messgenauigkeit haben die eingetragenen Geraden einen gemeinsamen Schnittpunkt. Dies ist, unter Berücksichtigung der Messunsicherheit, erreicht worden. Die Messergebnisse werden sind als präzise einzustufen. Die Messung weicht lediglich um $\approx 0.5 \,\mathrm{cm}$ von der angegebenen Brennweite ab. Dies ebenfalls auf eine hohe Präzision der Messung hin.

Als Linse mit unbekannter Brennweite, wurde eine befüllbare Linse genommen. Über eine Spritze mit Wasser konnte die Befüllung der Linse reguliert werden. Damit in der Linse ein konstanter Druck gewährleistet wurde, musste die Spritze an einer definierten Person fixiert werden. Die Fixierung wurde per Hand bewerkstelligt. Die Messung war länger, womit ein dauerhaft konstanter Druck unwahrscheinlich scheint. Dadurch können die Messung beeinflusst worden sein. Der in Diagramm 8 entstandene Schnittpunkt, weißt hingegen auf eine hohe Messgenauigkeit hin.

Die Messung der Linse mit unbekannter Brennweite ergab eine Brennweite von ca. 9,03 cm. Die Messgenauigkeit ist in Abbildung 8 einzusehen. Anhand des Schnittpunktes der Verbindungsgeraden ist die Messgenauigkeit im Rahmen der Messung als präzise zu bewerten.

Die chromatische Abberration ergab, dass die Brennweite bei blauer Lichtquelle minimal kleiner ist, als bei roter Lichtquelle. Dies entspricht der Erwartung.

Literatur

[1] TU-Dortmund. Versuch V408: Geometrische Optik. 9. Mai 2017. URL: http://129. 217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V408.pdf.